


■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Functionele elegantie in de verpleging

hospitel

Speciale verpleegbedden



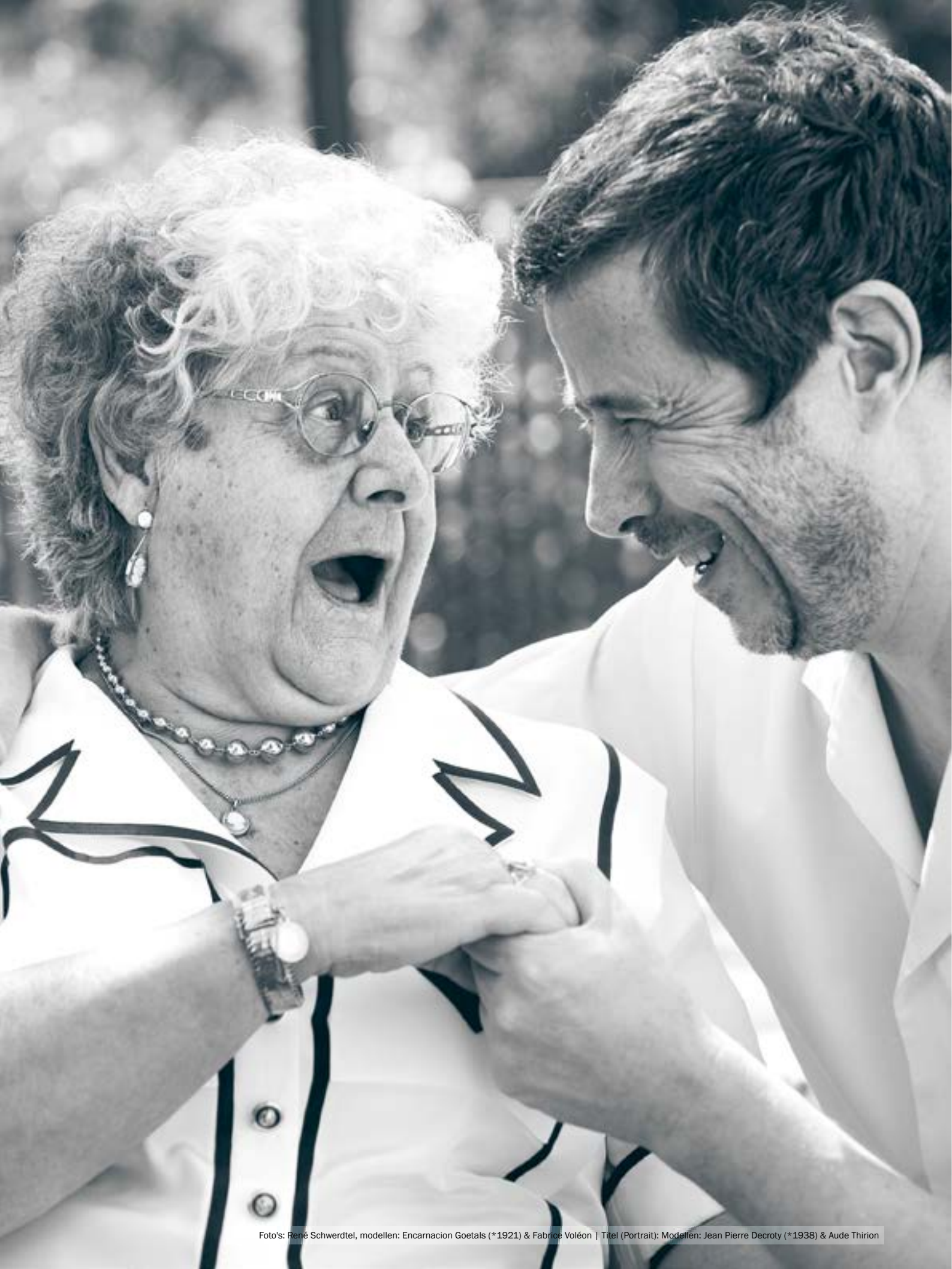

Foto's: René Schwerdtel, modellen: Encarnacion Goetals (*1921) & Fabrice Voléon | Titel (Portrait): Modellen: Jean Pierre Decroty (*1938) & Aude Thirion

Het hospitel-concept

Meer dan alleen maar een verpleeg- of ziekenhuisbed: hospitaal + hotel = hospitel

Het hospitel-concept combineert gerieflijkheid, comfort en multifunctionaliteit. Zijn toepassingsgebied is niet zozeer de acute verzorging in het ziekenhuis, maar primair de post-acute verpleging van patiënten in de segmenten:

- psychiatrie
- langdurige verpleging
- geriatrie
- orthopedie
- revalidatie
- plastische chirurgie

Extra opties en accessoires beschermen personeel en patiënt in dezelfde mate, met name in psychiatrische inrichtingen en bij onrustige patiënten.



Uw voordelen samengevat:

- gerieflijk design voor snelle genezing (healing environment)
- mobilisatievriendelijke onrusthekken: zonder grote middenopening, zonder stijlen en rails
- gemakkelijk te reinigen dankzij kunststof oppervlakken
- vermijding van "cross infection" door neerklapbare hoofdeindeoplossing + onrusthekken zonder protector
- automatische functies: cardiac chair en elektrische, hoge beenstand
- eenhandige CPR, bereikbaar vanaf beide zijden
- eenhandige bedverlenging
- BiNetic-frame ter voorkoming van doorligwonden en ergonomische comfortzitpositie

Het hospitel-woonidee



Materiaal- en kleurkeuze volgen de huidige, natuurlijke woontrend. Zo ontstaat een gerieflijke, warme sfeer waarin patiënten zich veilig en geborgen voelen. De "healing environment" zorgt voor een snelle genezing.



Laag verpleegbed sentida 6 in het design A10



Nachtkastje vivo E2T



Decor kersen

hospitel | functionaliteit en gerieflijkheid

01

Gepatenteerd SafeFree®-onrusthekkenconcept

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard – onze bijdrage voor minder fixatie volgens de methode voor minder fixatie* en het Redufix**-project

- gedeelde onrusthekken, telkens in 4 hoogten instelbaar
- geen middenstijl, geen gevaarlijke middenopening

02

3-traps-strategie***

voor de hoogteverstelling:

- voorkomen van vallen in de slaapfase bij 27 cm bedhoogte
- veilige mobilisatie op stoelhoogte bij een bedhoogte van 41 cm
- optimale verpleegpositie bij een bedhoogte van 80 cm

03

BiNetic-ligvlak

met dubbele retractie:

Echte voorkoming van doorligwonden -

meer dan alleen een zogeheten DBfK-rugsteun

- uw plus: vermindering van de bekken-compressie evenals de wrijvings- en afschuifkrachten door beensteunretractie met 6 cm
- rugsteunretractie met 11 cm volgens DBfK-aanbeveling

04

Designhandschakelaar

Verbeterde en uitgebreide functionaliteit

- 3 veiligheidsniveaus instelbaar: verplegings-, bewoner- en veiligheidsmodus
- 2 automatische posities: comfortzit- en profylaxe-automatiek
- mobilisatiefunctie
- nachtluchtregeling
- aparte beensteunverstelling
- beveiliging tegen onopzettelijk gebruik



NIEUW!

Nu ook leverbaar met antimicrobiële oppervlakken

05

Nachtlichtfunctie

Optioneel kan een nachtlucht geïntegreerd worden

- vereenvoudigt de oriëntatie 's nachts
- meer veiligheid voor de patiënt
- gemakkelijke controle van de stroomnetaansluiting
- regeling via handschakelaar

06

Verrijdbaarheid sentida 6 (afb.)

- naar keuze 100 mm Decora, 125/150 mm "Cover-Design" lichtlopende wielen of 125 mm "LINEA" dubbele loopwielen (zie afb.)
- probleemloos transport ook buiten de patiëntenkamer
- centrale rembeugel (bij het voeteneinde) met geïntegreerde richtingsvergrendeling
- centrale rem op 4 wielen

Technische gegevens*

- hoogteverstelbereik: 27-80 cm
- veilige werklust: 225 kg



De hospiteluitrusting is ook te combineren met:



movita



movita casa



carisma



sentida 1, 3, 4




sentida 5

3 bedlengtes | 3-traps-strategie

200 cm

Bedlengte 200 cm:
De gedeelde onrusthekken bieden bescherming zonder middenopening > 318 mm* en zonder protector

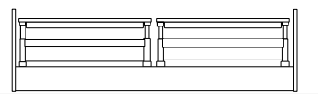

220 cm

Bedverlenging tot 220 cm:
is bij sentida met gedeelde onrusthekken tijdelijk instelbaar – Volledige bescherming wordt door protector bij het voeteneinde (accessoire) gegarandeerd



210 cm

Alternatieve bedlengte 210 cm:
Bescherming bij het voeteneinde met langere onrusthekken zonder accessoires en zonder opening > 318 mm**



3 bedlengtes zonder middenopening > 318 mm en zonder middenstijl

Alle verpleegbedden van wissner-bosserhoff beschikken standaard over een geïntegreerde bedverlenging. Door de **express-bedverlenging** (zie afb. onder/optie) kan sentida **met gedeelde onrusthekken** flexibel en zonder gereedschap voor verschillende bedlengtes worden aangepast. Daarbij worden in elke configuratie de richtlijnen van de nieuwe norm IEC 60601-2-52 aangehouden.

3-traps-strategie – veilig slapen, mobiliseren en verzorgen

sentida 6 bezit niet alleen over een groot **hoogteverstelbereik van 27 tot 80 cm**, maar beschikt bovendien dankzij de intelligente regeling ook over een botsingsbescherming bij het instellen van de comfortzitpositie. Dat wordt met name in combinatie met de bedverlenging tot 220 cm een onontbeerlijk voordeel.

IVS = Intelligent Verticaliserings-Systeem:

- comfortabel verstelbereik 27-80 cm
- eerste tussenstop om uit bed te stappen op stoelhoogte bij 41 cm
- botsingsbescherming bij instelling van de comfort-zitpositie vanuit de lage positie en bij gebruik van een bedverlenging

27 cm

Voorkomen van vallen in de slaapfase



41 cm

Veilige mobilisatie op stoelhoogte



80 cm

Optimale verpleegpositie



SafeFree®

Het gepatenteerde onrusthekkenconcept voor vrijheid en mobilisatie

4 onrusthekken

1

In de neergelaten toestand bieden de gedeelde onrusthekken behalve een geriefelijke uitstraling ook een vrije toegang tot de patiënt voor de dagelijkse verpleging, verwisselen van verband of het opmaken van het bed. Storende accessoires, zoals middenstijlen of vast aangebrachte zijpanelen hoeven niet verwijderd en opgeborgen te worden.

2

Voor de veiligheid 's nachts is het vaak voldoende om de lage positie van het bed te combineren met de eerste uittrekfase van het onrusthek aan het hoofdeinde. Deze passieve bescherming voorkomt overbodige barrières en verlaagt blijvend het risico van het uit bed vallen. De onrusthekken geven oriëntatie, zonder de bewoner te beperken.

3

De 3/4-bescherming maakt een bewuste opstaopening bij het voeteneinde mogelijk ter vermindering van de vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) terwijl de veiligheidseisen tegelijkertijd hoog blijven. Door aanpassing van de bedhoogte in combinatie met de hoogte van het onrusthek past sentida zich aan de lengtes van alle patiënten aan.

4

De derde uittrekfase dient voor de omvattende beveiliging van de patiënt. In de bovenste positie sluiten beide delen van het onrusthek zo nauw op elkaar aan, dat ze net zo veilig zijn als een doorgaand zijrooster. Het gebruik van accessoires voor het sluiten van een middenopening is niet nodig.

4-traps-uittrek

Geen bescherming nodig



Passieve bescherming zonder VBM



3/4-bescherming zonder VBM



Volledige bescherming bij 12-18 cm matrassen



4 voordelen

Geen barrière

Geen stijl, geen middenopeningsprotector




Oriëntatie

in plaats van vrijheidsbeperkende maatregel (VBM)




Mobilisatie

met aanpassing aan de lengtes van patiënten

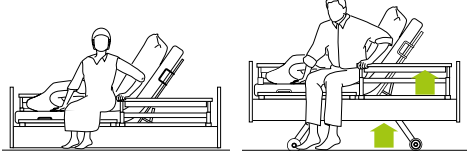

Veiligheid

overtreft de nieuwe norm IEC 60601-2-52

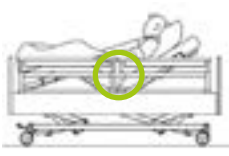

SafeSense*

Veiligheid en zelfredzaamheid overdag en 's nachts dankzij de innovatieve stimulering in zelfredzaamheid

wissner-bosserhoff - uw betrouwbare partner bij het minimaliseren van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM): meer veiligheid voor de bewoner, hogere zorgkwaliteit maar nooit ten koste van de zelfredzaamheid. Gebruik ons innovatieve beduistapsysteem en minimaliseer zo vrijheidsbeperkende maatregelen. Het is uitgerust met een automatisch nachtlicht dat tijdens het uitstappen uit bed wordt ingeschakeld en dooft wanneer de patiënt weer in bed ligt. SafeSense is compatibel met de gebruikelijke verpleegstersignaal-systemen op de markt. Verpleegbedden van wissner-bosserhoff vanaf 2002 kunnen hiermee worden uitgebreid of achteraf uitgerust.



Meer veiligheid – minder VBM**

- snellere reactietijd bij vallen
- hoger veiligheidsniveau bij nacht- en weekenddiensten
- ideaal in combinatie met sentida lage verpleegbedden en SafeFree®-onrusthekken

Automatisch nachtlicht

- nachtlicht wordt bij het verlaten van het bed automatisch geactiveerd
- nachtlicht dooft zodra de bewoner weer in bed ligt



Instelbare timer voor oproep zorgverlener

- flexibel en traploos instelbaar van 0 sec. directalarm tot 30 min.
- aanpassing aan de mogelijkheden van de bewoner



Geïntegreerd of als inbouwpakket achteraf

- accessoire-optie voor actuele WIBO-verpleegbedden
- inbouwpakket achteraf voor elektrische WIBO-verpleegbedden vanaf 2002
- als draadloze of bedrade oplossing leverbaar



De aanvullende hospitel-functies

In vergelijking met het standaardassortiment bieden de hospitelbedden extra functies



Plug & Play

Via de bussen die aan beide zijden zijn aangebracht voor de opname van de handschakelaar kan deze flexibel links of rechts worden gebruikt of in geval van nood volledig van het bed worden verwijderd, om verwondingen bij de patiënt te voorkomen.



Houder voor vastzetgordel

De houders voor vastzetgordels die bij de bovenbeensteun en de rugsteun en eveneens bij het zitgedeelte zijn aangebracht, maken een goed bereikbare en stabiele oplossing mogelijk voor het aanbrengen van vastzetgordels.



Krimpslang

Een krimpslang die over het netsnoer is getrokken, voorkomt het verdraaien van het snoer en biedt zodoende meer veiligheid voor de patiënt, omdat verwurgingen met de kabel onmogelijk zijn.



Stootelement 3D

De 3D-stootwielen beschermen op effectieve wijze de wanden – horizontaal bij contact tijdens het manoeuvreren met de bedden, verticaal bij de hoogteverstelling.




CPR

Een noodverlaging van de rugsteun die vanaf het hoofdeinde kan worden geactiveerd, zorgt ervoor dat het ligvlak ook bij stroomloos gebruik of in noodsituaties snel in een vlakke positie kan worden gebracht.

Afsluitbare remmen (z. afb.)

Bedden in psychiatrische inrichtingen mogen vaak niet worden verplaatst - noch door het personeel, noch door de patiënten zelf. Doordat de remmen afsluitbaar zijn, wordt dat consequent gegarandeerd (beschikbaar voor sentida 5/6 en carisma).

voor het gebruik in de post-acute verpleging of in psychiatrische inrichtingen.

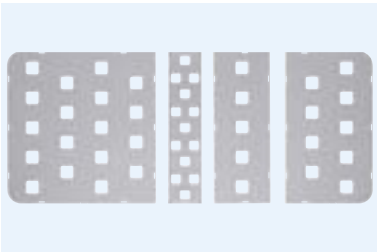

Gefixeerd ligvlak

Voor bijzonder agressieve patiënten kunnen de ligvlakelementen bovendien aan het frame van het ligvlak worden vastgezet, om zo het verwijderen van elementen te verhinderen.



Inklapbaar hoofd-/voeteneinde

Hoofd- en voeteneinde die beide inklapbaar zijn, verzekeren het verplegend personeel in geval van nood van een betere bereikbaarheid van de patiënt. Daarnaast worden ook "cross infections" vermeden.



Beschermlijst tegen stoten

De zij-elementen met aangebrachte zijbeschermlijst beschermen het bed tegen beschadigingen tijdens gebruik van heftoestellen of soortgelijke accessoires.



Express-bedverlenging

Dankzij de express-bedverlenging kunnen hospitelbedden met gedeelde onrusthekken flexibel en zonder gereedschap worden aangepast aan verschillende bedlengtes (210 of 220 cm).



Gestoffeerde bescherming voor onrusthekken

Onrusthekken met gestoffeerde bescherming beschermen zowel de patiënt als ook het bed. Het verwondingsgevaar voor onrustige patiënten, als gevolg van de omhoog geplaatste onrusthekken, wordt daardoor effectief verminderd.


Accupack (z. afb.)

Door een accu die in de motor is aangebracht, kunnen bij het bed ook tijdens een stroomonderbreking of het transport de elektrische verstelfuncties worden bediend. Dat verbetert de onafhankelijkheid en verhoogt zodoende de veiligheid.

Hospitel-woonidee



Het hoofd- en voeteneinde, evenals de balk van de onrusthekken zijn afgerond om het verwondingsgevaar van onrustige en zeer bewegelijke patiënten aanzienlijk te beperken. Door de externe aangebrachte stollen van het hoofd- en voeteneinde beschikken deze over een bijzonder hoge stabiliteit.

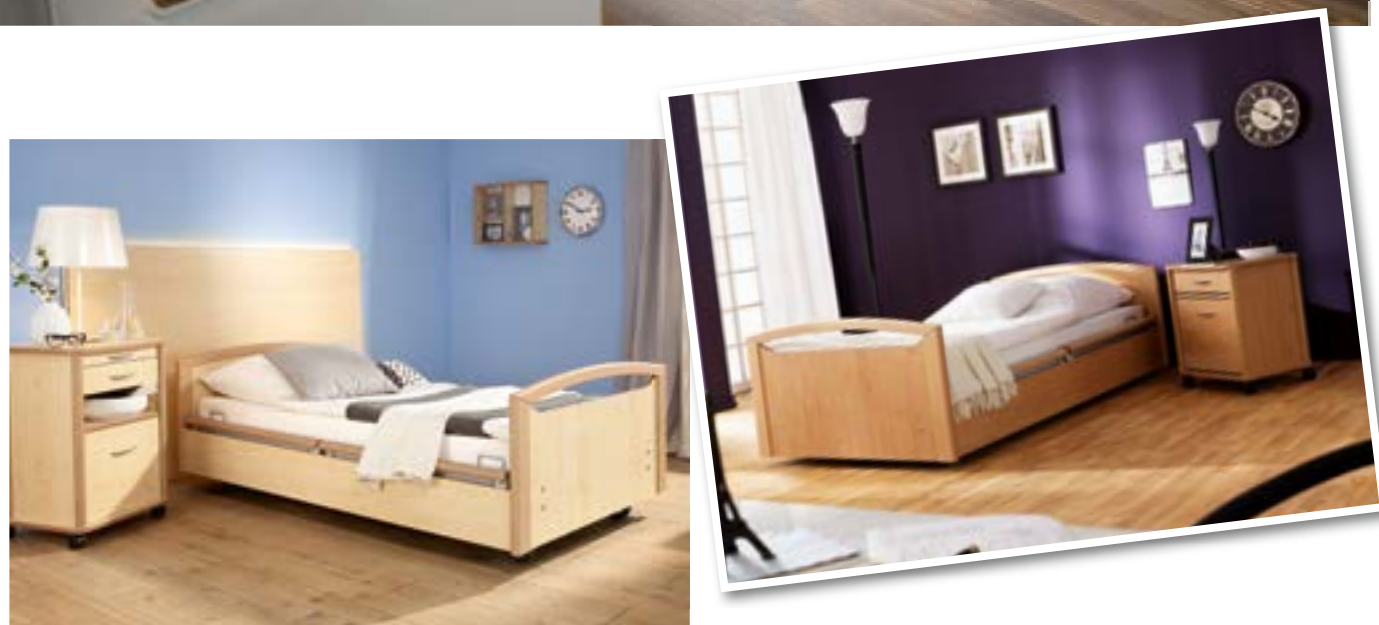

Design | Kleuren | decors*



Voor de bedden voor langdurige zorg en revalidatie is er een uitgebreid kleurconcept waarmee ze aan het kleurconcept van ziekenhuizen kunnen worden aangepast. Dit kleurconcept omvat effen kleuren en handrelingen die beschikbaar zijn in de uitvoering "silverline".




Onze certificaten – uw zekerheid

wissner-bosserhoff laat regelmatig zijn productieprocessen en het management door TÜV doorlichten. De onderneming is gecertificeerd volgens de bepalingen van de DIN EN ISO 9001:2008 voor kwaliteitsmanagementsystemen, evenals van de DIN EN ISO 13485:2012+AC:2012 voor de fabricage van medicinale producten.




Opties en accessoires

Afmetingen

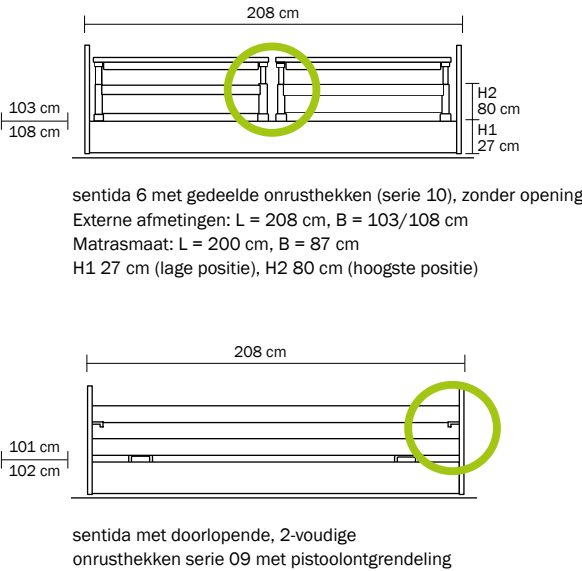


Ligvlakken

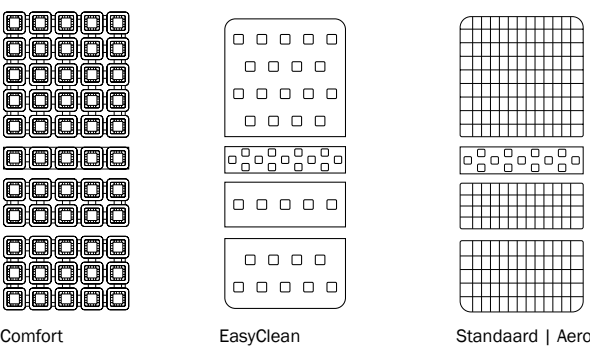


Opties en accessoires


Bedverlengingen

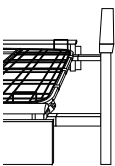


Tijdelijke bedverlenging onrusthek serie 10 (standaard)

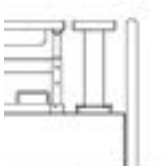


Permanente bedverlenging onrusthek serie 10 (optie)

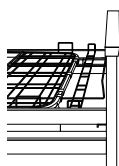

Permanente bedverlenging onrusthek serie 09 (optie)

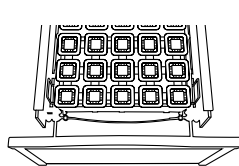


Bedverlenging met expressontgrendeling (optie)

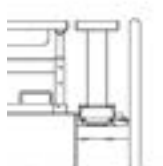

10-0570 / 10-0580
Protector voor bedverlenging met 20 cm (optie)


Opties

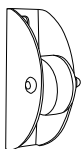


Verticale wandafstandswielen



3D-wandafstandswielen horizontale en verticale functie

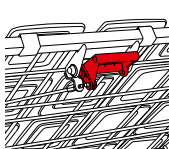

Ontgrendeling CPR aan de rugsteun

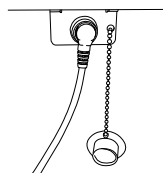

Plug + Play voor gebruik van de handschakelaar aan één of beide bedzijden




D-box met verlichtingsaansluiting voor optimaal kabelmanagement




Onderbedverlichting (schakelbaar)


Accessoires SafeSense

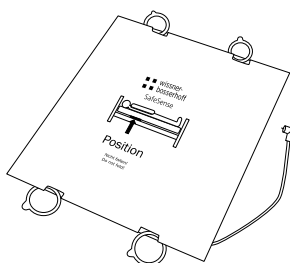


02-000712
Sensormat 50 x 50 cm voor rugsteun

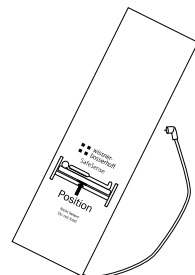


02-000713
Sensormat 80 x 20 cm voor zitgedeelte

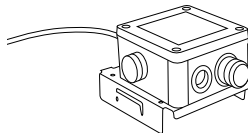

Kabeloplossing:
04-1544-001
Beduistapbox, voor bed zonder accu
04-1544-004
Beduistapbox, voor bed met accu
Draadloze oplossing:
04-1544-002
Beduistapbox, voor bed zonder accu
04-1544-003
Beduistapbox, voor bed met accu

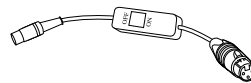


04-1508
Adapterkabel met passende stekker voor de aansluiting op het oproepsysteem (klantspecifiek)

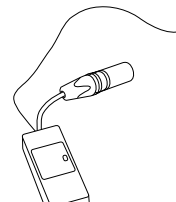


02-000726
Draadloze ontvanger (alleen voor draadloze oplossing)


Accessoires

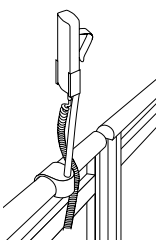


10-0419
Houder voor handschakelaar voor gedeelde onrusthekken
10-0421
Handschakelaar, kort

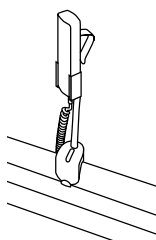


10-0422
Accessoire- en handschakelaarhouder voor doorlopende onrusthekken
10-0421
Handschakelaar, kort

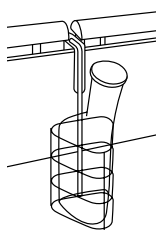


10-0424
Accessoire- en handschakelaarhouder voor het bevestigen aan het zijpaneel
50-0165 Urinaalhouder
50-0164 Urinezakhouder (zonder afb.)

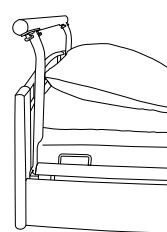

10-0534
Transportgreep EasyMove

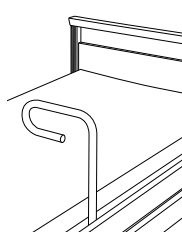


10-0715
Opstahulp voor onrusthekken serie 09 en serie 10, evenals ¾-onrusthekken

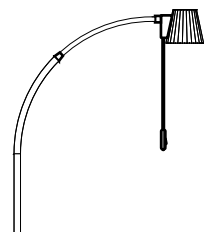


50-0212 Design-halogenlamp soluna met 12V-transformator
50-0213 Design-halogenlamp soluna zonder 12V-transformator
50-0237 Design-LED-lamp soluna met netadapter
50-0550 Design-LED-lamp soluna zonder netadapter




50-0206
Valmat
B 90 x L 200 cm, hoogte ca. 4,5 cm

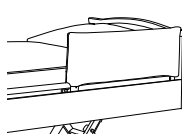


50-0174
Gestoffeerde bescherming voor gedeelde onrusthekken serie 10

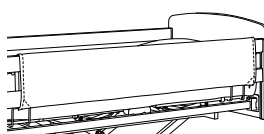


50-0338
Gestoffeerde bescherming voor serie 09 2-voudige onrusthekken

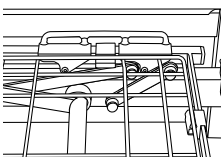


10-0563/10-0533/10-0521
Segufix-bevestiging
- voor bovenbeensteun
- voor de rugsteun
- voor het zitgedeelte

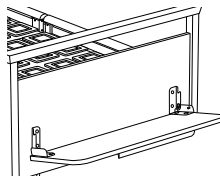

10-0719
Beddengoedrek, compatibel met alle bedden

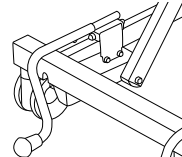

10-0707
Wandafstandshouder kort aan hoofdeinde (alleen sentida 5 + 6)

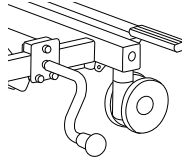

10-0708
Zijdelingse wandafstandshouder (alleen sentida 5 + 6)



Functionele elegantie in de verpleging

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: +49(0)2377/784-0
Fax: +49(0)2377/784-163
E-Mail: info@wi-bo.de
www.wi-bo.de

wissner-bosserhoff Belgium bvba / sprl

Bedrijvenlaan 1
B-2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 21 08 41
Fax: +32 (0)15 29 14 64
E-mail: info@wi-bo.be
www.wi-bo.be

wissner-bosserhoff Nederland B.V.

Amstelwijckweg 2
3316 BB Dordrecht
Tel.: +31 (0)78-652 18 50
Fax: +31 (0)78-652 18 55
e-mail: sales@wi-bo.eu
www.wi-bo.com